

# Инструкция по установке программы ЭМИС

## Системные требования

### Сервер

Операционная система: Linux Fedora 15 и выше

Процессор: Intel / AMD

Память:

- минимально: ОЗУ 512 МБ
- оптимально: ОЗУ 2 ГБ и более

Свободное место на диске:

- минимально: 320 ГБ
- оптимально: 1 ТБ и более

СУБД: MySQL 5.5 и выше

### Клиент

Операционная система: Windows XP SP2/7/8/10

Объем оперативной памяти:

- минимально: ОЗУ 1 ГБ
- оптимально: ОЗУ 2 ГБ и больше

Дополнительное программное обеспечение: Microsoft .Net Framework 4.0


(<https://www.microsoft.com/ru-ru/Download/confirmation.aspx?id=17718>)

## Установка приложения

Перед установкой убедитесь, что ваш компьютер подключен к локальной сети вашей организации. Так же, у вас должны быть реквизиты доступа к базе данных, которая заблаговременно должна быть создана системным администратором вашей организации или с помощью специалиста компании “ЭМИС”.

Для установки программы "ЭМИС" распакуйте zip-архив с программой в заранее созданную папку в любом месте на жестком диске. Например: "C:\Program Files\EMIS".

Далее запустите исполняемый файл emis.exe. Перед вами откроется окно первоначальной настройки.

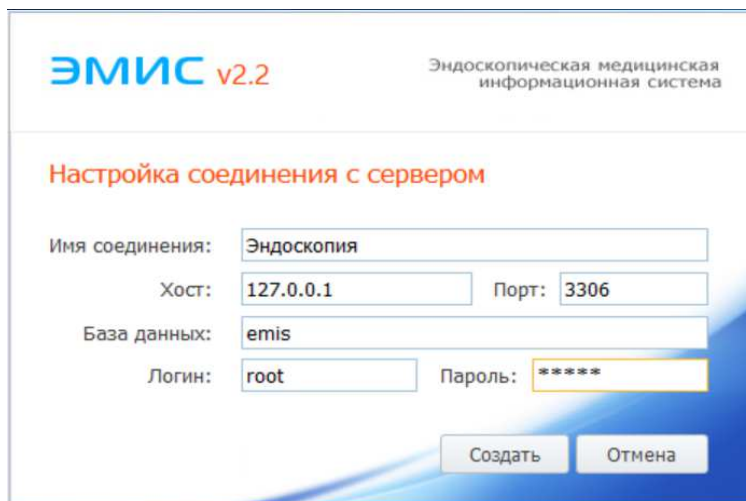


The screenshot shows the "ЭМИС v2.2" (EMIS v2.2) window, titled "Эндоскопическая медицинская информационная система" (Endoscopic medical information system). The main heading is "Настройка соединения с сервером" (Server connection configuration). The form contains the following fields and values:

- Имя соединения: Эндоскопия
- Хост: 127.0.0.1
- Порт: 3306
- База данных: emis
- Логин: root
- Пароль: \*\*\*\*\*

At the bottom right, there are two buttons: "Создать" (Create) and "Отмена" (Cancel).

Рис. 1.

Укажите требуемое название соединения, а так же ранее полученные параметры доступа к базе данных. После заполнения всех полей, кликните мышкой на кнопке "Создать". Если параметры доступа к базе данных были указаны верно, начнется процедура разметка базы (Рис.2.).

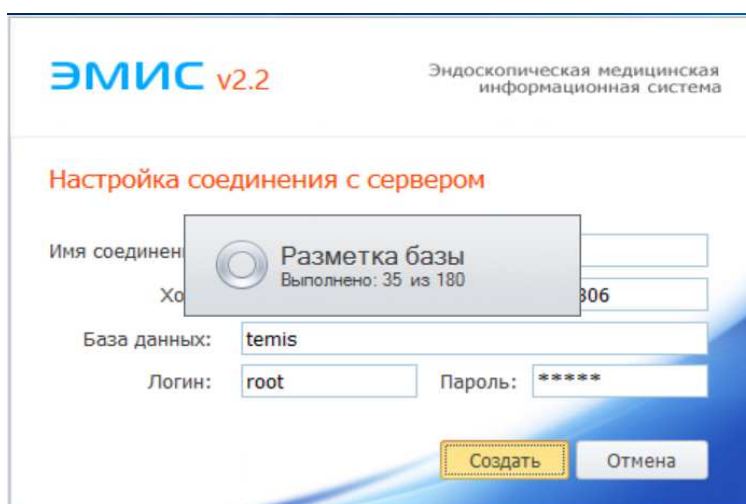

The screenshot shows the same "ЭМИС v2.2" window as in Figure 1, but with a modal dialog box overlaid in the center. The dialog box is titled "Разметка базы" (Database setup) and displays "Выполнено: 35 из 180" (Completed: 35 of 180). The background form fields are partially visible and dimmed:


- Имя соединен: Эндоскопия
- Хо: 127.0.0.1
- Порт: 3306
- База данных: temis
- Логин: root
- Пароль: \*\*\*\*\*

The "Создать" button is now highlighted in yellow, indicating it is active.

Рис. 2.

Во время процедуры разметки создаются необходимые таблицы, процедуры и вносятся первоначальные данные для приложения. Процесс может занять некоторое время. Ни в коем случае не отключайте компьютер до тех пор, пока процедура настройки не будет завершена.

После завершения разметки базы данных, перед вами появится диалог, приглашающий ввести имя пользователя и пароль для получения доступа к работе с приложением (Рис.3.).

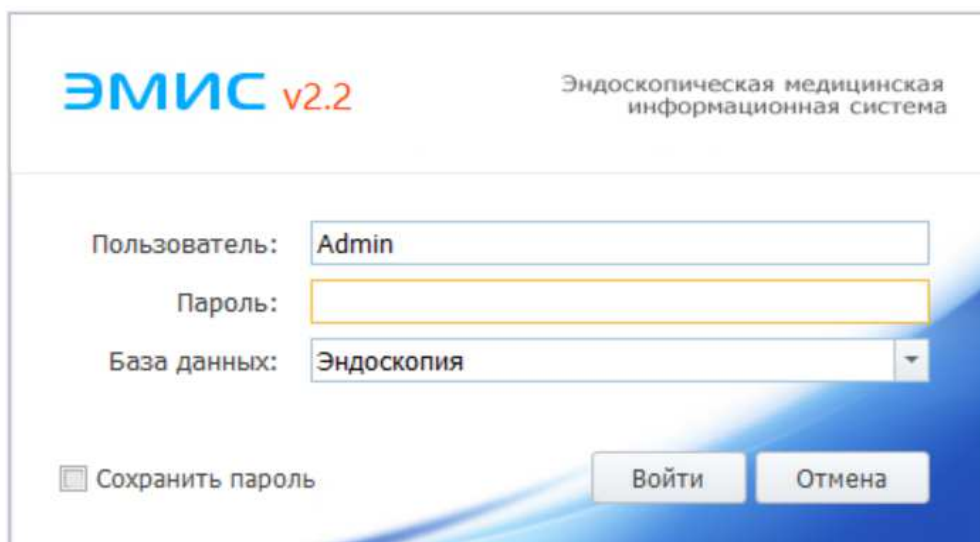

ЭМИС v2.2  
Эндоскопическая медицинская информационная система

Пользователь: Admin

Пароль:

База данных: Эндоскопия

Сохранить пароль

Войти Отмена

Рис. 3.

По умолчанию, в приложении создана учетная запись администратора приложения с именем **Admin** и паролем **admin**. **Не рекомендуется вести медицинскую документацию из-под учетной записи администратора.** Как изменить пароль учетной записи администратора, а так же, как создавать новые учетные записи, смотрите в Руководстве пользователя ЭМИС.